


In vier Schritten erlauben Sie der aphavox-WebApp den Zugriff auf das Mikrofon Ihres Rechners

1. Nachdem Sie sich in der WebApp angemeldet haben, klicken Sie auf das Schloss-Symbol in der Browser-Adresszeile

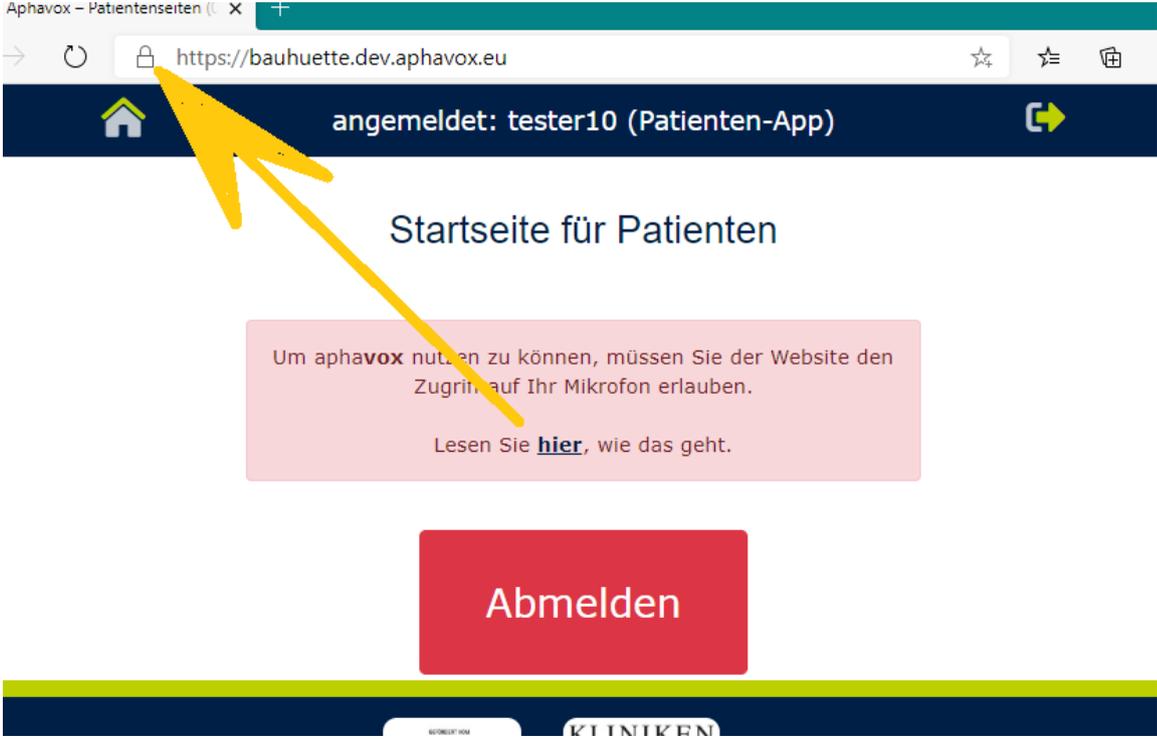

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://bauhuette.dev.aphavox.eu`. The browser's address bar contains a lock icon, a refresh icon, and navigation icons. Below the address bar is a dark blue navigation bar with a home icon on the left, the text "angemeldet: tester10 (Patienten-App)" in the center, and a right-pointing arrow icon on the right. The main content area has a white background with the heading "Startseite für Patienten". A pink rectangular box contains the text: "Um aphavox nutzen zu können, müssen Sie der Website den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben. Lesen Sie [hier](#), wie das geht." Below this box is a large red button with the text "Abmelden". At the bottom of the page, there is a dark blue footer with a yellow bar above it, containing the text "KLINIKEN" and "KONFERENZ". A yellow arrow points from the lock icon in the address bar to the pink permission box.

Aphavox – Patientenseiten (1 X)

→ ↻ 🔒 `https://bauhuette.dev.aphavox.eu` ☆ ≡ 🗑

🏠 angemeldet: tester10 (Patienten-App) ➡

Startseite für Patienten

Um aphavox nutzen zu können, müssen Sie der Website den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben.
Lesen Sie [hier](#), wie das geht.

Abmelden

REGISTRIERUNG KLINIKEN

2. Im ausklappenden Fenster klicken Sie auf „Websiteberechtigungen“ (Website-Einstellungen). In einem neuen Browser-Tab wird das „Einstellungen-Fenster“ angezeigt

The image shows a browser window with the address bar displaying "https://bauhuetten.dev.aphavox.eu". A security notification is visible, stating "Verbindung ist sicher." (Connection is secure). Below this, a settings menu is open, listing various site permissions. A yellow arrow points to the "Websiteberechtigungen" (Website permissions) option. The menu also shows "Tracking-Verhinderung" (Tracking prevention) and a list of trackers for the current site, which is currently set to "Ein" (On).

phavox – Patientenseiten (x +

https://bauhuetten.dev.aphavox.eu

Verbindung ist sicher. x

Ihre Informationen (beispielsweise Kennwörter oder Kreditkartennummern) bleiben privat, wenn sie an diese Website gesendet werden.

- Zertifikat (gültig)
- Cookies (1 in Verwendung)
- Websiteberechtigungen**

Tracking-Verhinderung
Ausgeglichen (empfohlen) [Für alle Websites verwalten](#)

bauhuetten.dev.aphavox.eu Ein v

Tracker (0 blockiert)

10 (Patienten-App)

für Patienten

n, müssen Sie der Website
Mikrofon erlauben.

, wie das geht.


elden

3. Ändern Sie die Berechtigung für das Mikrofon von „Fragen“ auf „Zulassen“

The screenshot shows the Edge browser settings page for site permissions. The left sidebar contains the 'Einstellungen' (Settings) menu with options like 'Einstellungen durchsuchen', 'Profil', 'Datenschutz und Dienste', 'Darstellung', 'Beim Start', 'Seite „Neuer Tab“', and 'Websiteberechtigungen'. The main content area is titled 'Websiteberechtigungen / https://bauhuetten.dev.aphavox.eu'. It lists various permissions: Standort (Fragen), Kamera (Fragen), Mikrofon (Fragen), Bewegungs- oder Lichtsensoren (Zulassen), and Benachrichtigungen (Fragen). The 'Mikrofon' row is highlighted with a yellow box, and a yellow arrow points to the dropdown menu which currently shows 'Fragen (Standardeinstellung)'.

This screenshot shows the same Edge settings page after the change. The 'Mikrofon' row is still highlighted with a yellow box, but the dropdown menu now shows 'Zulassen'. The other permissions remain the same: Standort (Fragen), Kamera (Fragen), Bewegungs- oder Lichtsensoren (Zulassen), and Benachrichtigungen (Fragen).

4. Schließen Sie den Tab „Einstellungen“ durch Mausklick auf das X.
Die WebApp fordert Sie zum Aktualisieren (Neu laden) der Seite auf, damit die neu gesetzte Berechtigung in Kraft tritt. – Nach dem Aktualisieren können Sie mit dem Üben beginnen.

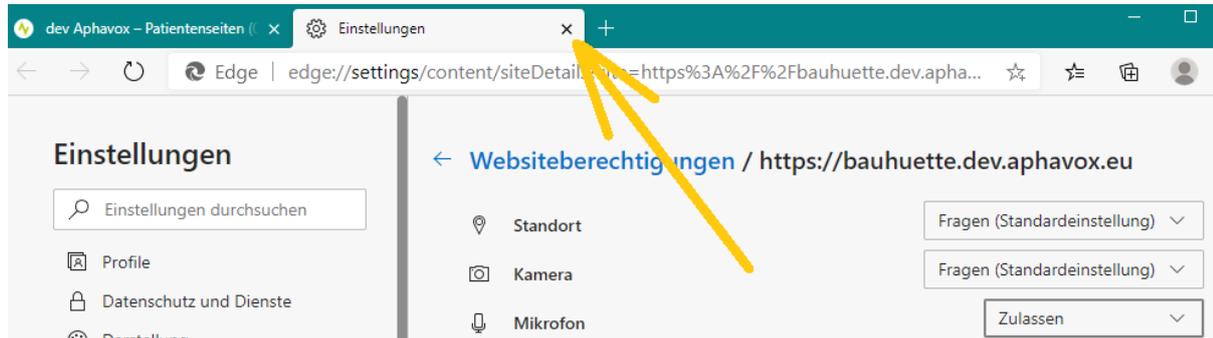

Startseite für Patienten

Jetzt trainieren

Abmelden